


Style Follow

Skinable

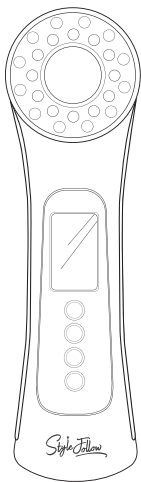

Skinable

5合1充电式超声波TRUE SOLUTION

产品使用说明书



使用前请务必阅读安全注意事项并正确使用。阅读使用说明书后，请将其保管在使用者随时可以看到的场所。

1. 安全注意事项	4
安全使用方法	4
2. 使用前	7
部件	7
各部件名称	8
3. 操作	8
基本操作方法	8
中断/重新开始操作	10
操作过程中添加/变更模式	10
充电方法	10
各种模式的功能	11
4. 根据皮肤状态运用True Solution	12
运用方法_1. 当您需要细致洁面时	12
运用方法_2. 当您需要为皮肤补充营养时	13
运用方法_3. 当您需要改善肤色时	14
运用方法_4. 当您需要护理皱纹时	15
运用方法_5. 当您需要护理皮肤问题时	16
运用方法_6. 当您需要增强皮肤弹性时	17
5. 解决问题	18
报修前的检查事项	18
6. 附录	19
产品规格	19
产品保证书	19
A/S指南	19

安全使用方法

以下情况必须咨询专业医生后再使用



- 心血管疾病
- 内分泌异常
- 感觉神经系统异常
- 皮肤疾病
- 眼科疾病及手术(LASIK、LASEK等)
- 感染性疾病
- 癫痫症状患者
- 正在服用激素失调治疗药物者
- 患有其他疾病及病名或身体存在异常时
- 正在接受皮肤科相关治疗或皮肤状态存在异常时
- 过敏性皮肤、痘痘、皮炎、皮肤手术、,整形、脱发手术
- 患有皮肤疾病或皮肤存在异常时
- 佩戴心脏起搏器、移植装置或佩戴金属假肢时

使用本设备时,根据个人的皮肤状态,可能会出现多种形态的皮肤刺激。如产生此类刺激,请减少使用次数。



- 过去2个月内接受过皮肤手术、整形、脱发手术等,目前正处于皮肤恢复期时,请勿使用本设备。请向专业医生咨询使用时期后再使用。



- 请勿用于包括口腔在内的黏膜部位及甲状腺所在的悬雍垂肌部位。切勿将此设备直接放在耳朵上。



- 妊娠期、经期及哺乳期女性不建议使用。(该时期激素平衡状态不稳,可能会暂时性地加重皮肤问题。)



- 儿童或无法自由表达意见者禁止使用。



- 对阳光过敏的光过敏性疾病患者禁止使用。



- 操作过程中请勿直视LED灯光。长时间注视灯光会导致眼球损伤。



- 使用前,请取下本设备接触部位佩戴的贵金属。




- 注意防止儿童或宠物将产品放入口中或拆卸。



- 使用产品时或使用完后,如出现皮肤发红、浮肿、发痒等症状,请停止使用。



- 为了减少发生冲击、火灾及其他伤害的风险,请勿投掷产品,并尽量避免产品接触水。

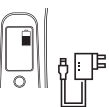


- 使用后请用湿巾或酒精棉擦拭后保管。



- 请勿保管在直射光线强烈或潮湿的场所。



- 严禁用水冲洗。可能会引发故障。

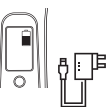


- 请在充满电的状态下使用设备。



- 请勿一边充电,一边使用设备。



- 潮气或水气可能会腐蚀充电接点。

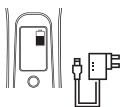

- 使用前请先熟悉正确的使用方法。



- 产品发生异常时,请停止使用,并咨询客服中心。

Q & A

1. 應該使用哪種化妝品？

洁面后, 在涂抹基础化妆品后使用。使用含有以下成分的化妆品时可能会降低效果, 请注意使用。

(例如: 变性酒精、防晒霜、视黄醇、精油成分)

*洁面模式应在洁面阶段或使用基础化妆品之前的阶段使用

2. 使用該設備時可以睜眼嗎？

仅当使用LED模式(RED, BLUE, GREEN)时, 建议佩戴眼罩或尽量闭上眼睛使用。

使用除了LED以外的其他模式时, 可以睁开眼睛舒适地使用。

3. 感覺干燥時該怎麼辦？




— 请将使用频率缩减为一周一次。



— 如果正在服用药物, 请咨询专业医生您所服用的药物是否为诱发皮肤干燥的药物后再使用。

部件

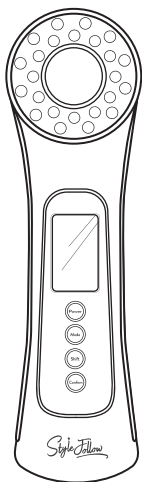

主机



USB充电线



收纳袋



眼罩




产品使用说明书




橡胶圈


各部件名称

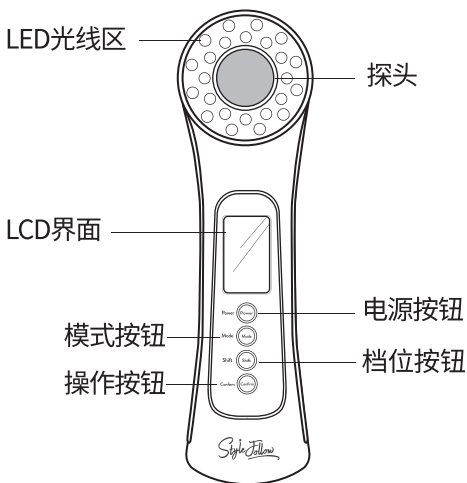


基本操作方法

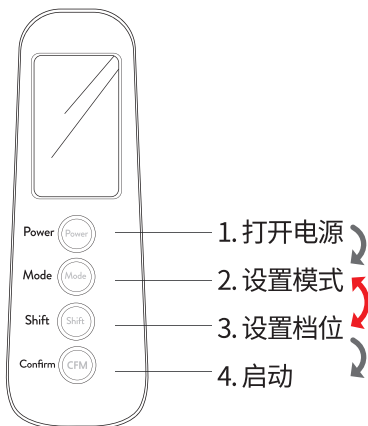

使用示例

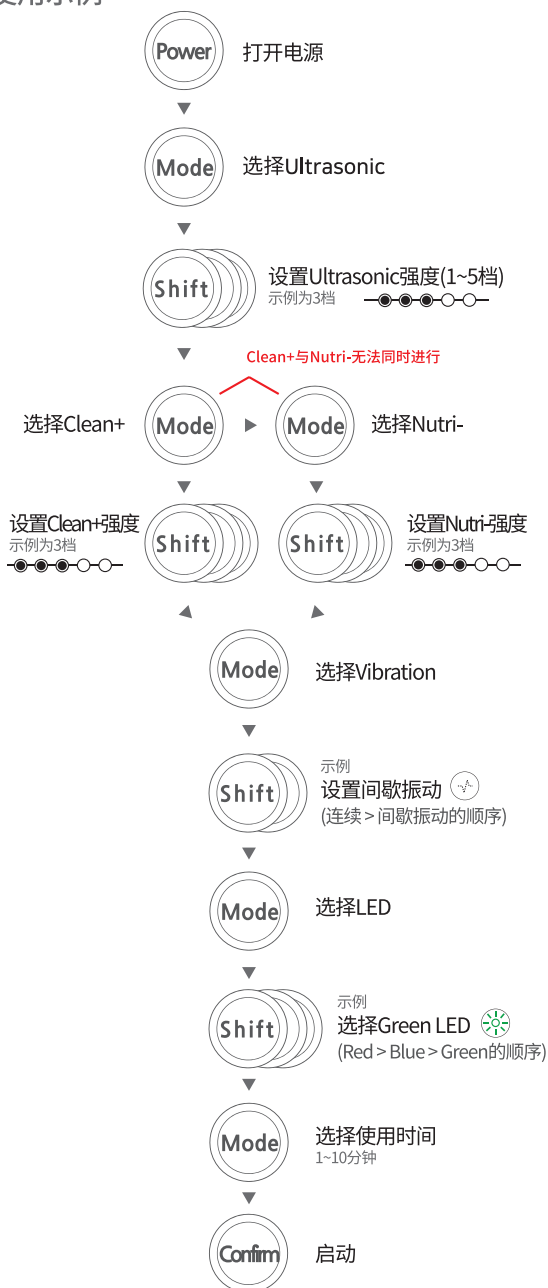


中断/重新开始操作

护理过程中想要暂停时, 点击  按钮即可停止设备运行。

重新开启时, 再次点击  按钮即可以之前进行的模式继续护理。

操作过程中添加/变更模式

护理过程中点击  按钮时, LCD界面上的字体会闪烁, 设备停止运行, 此时可以重新设置。


添加或变更模式后, 点击  按钮即可以设置的模式进行护理。

充电方法

1. 收到产品之后, 请先充满电后再使用。建议充电时间约为3~4小时。
2. 使用过程中, 当电池耗尽时, 设备将自动关闭。
3. 请使用5V 1A充电器充电。
4. 请勿使用快速充电器。

* 使用超出规格的适配器充电时, 可能会引发设备故障。

各种模式的功能

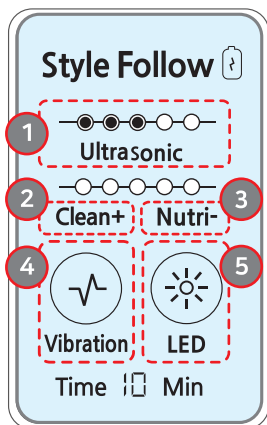

1 Ultrasonic

超声波按摩 - 皮肤弹性(1~5档)

2 Clean +

直流电阳离子-深层清洁(1~5档)

3 Nutri -

直流电阴离子-吸收化妆品/补充营养(1~5档)

4 Vibration



5 LED

Red / Blue / Green



Red
(625±3nm)

生成胶原蛋白, 增强弹性, 促进细胞再生及血液循环



Blue
(465±3nm)

缓解皮肤问题, 清除细菌, 缓解痘痘



Green
(525±3nm)


改善肤色, 抑制过多的黑色素

4. 根据皮肤状态运用True Solution

运用方法_1.当您需要细致洁面时

深层洁面功能


1. 涂抹洁面产品,按照以下顺序选择后使用。

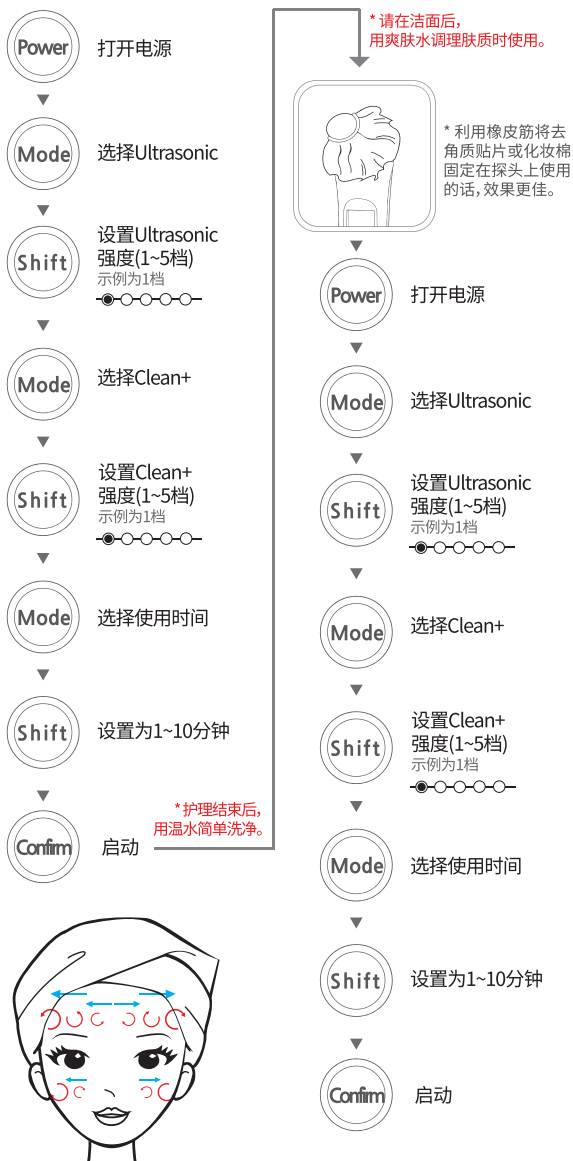

运用方法_2.当您需要为皮肤补充营养时

补充营养功能

1. 在基础护肤阶段涂抹安瓶或精华后,按照顺序按键使用。
2. 使用时,将探头紧贴在皮肤上,如画圈般按摩。
* 可在脸上敷着面膜的状态下使用。

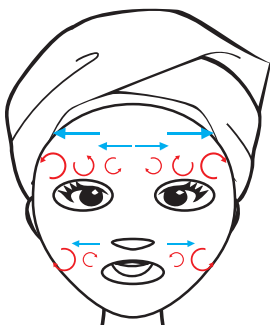


4. 根据皮肤状态运用True Solution

运用方法_3. 当您需要改善肤色时

LED功能

1. 洁面及涂抹完基础护肤品后, 选择绿灯, 用于需要护理的部位。
2. 由内向外慢慢地画圈使用。

*使用LED模式时, 请闭上眼睛或戴上眼罩后再使用。

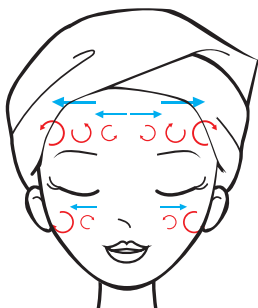


运用方法_4. 当您需要护理皱纹时

LED功能

1. 洁面及涂抹完基础护肤品后, 选择红灯, 用于需要护理的部位。
2. 由内向外慢慢地画圈使用。

*使用LED模式时, 请闭上眼睛或戴上眼罩后再使用。

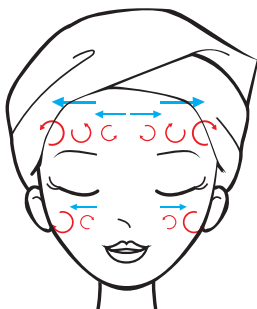


4. 根据皮肤状态运用True Solution

运用方法_5. 当您需要护理皮肤问题时


深层清洁功能 + LED功能

1. 涂抹洁面产品后,按照以下顺序设置使用。

*使用LED模式时,请闭上眼睛或戴上眼罩后再使用。

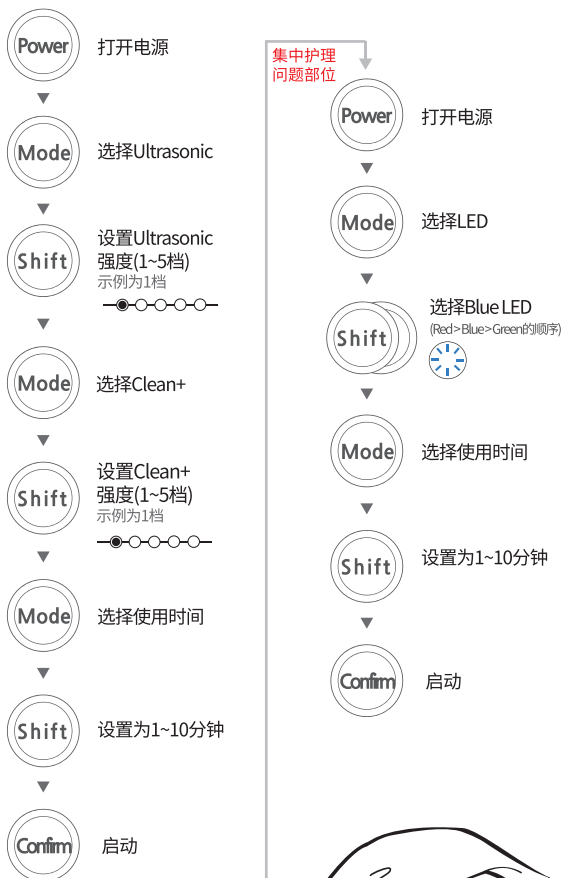



温水冲洗,
涂抹基础护肤品后使用

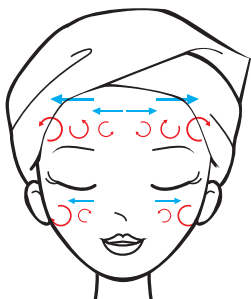

运用方法_6. 当您需要增强皮肤弹性时

补充营养功能 + 振动功能

1. 在基础护肤阶段涂抹安瓶或精华后, 按照顺序按键使用。
2. 由下向上提拉般缓缓移动。

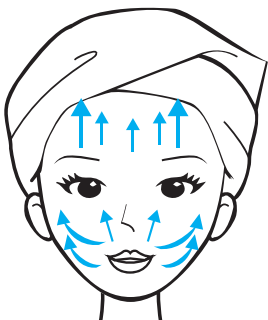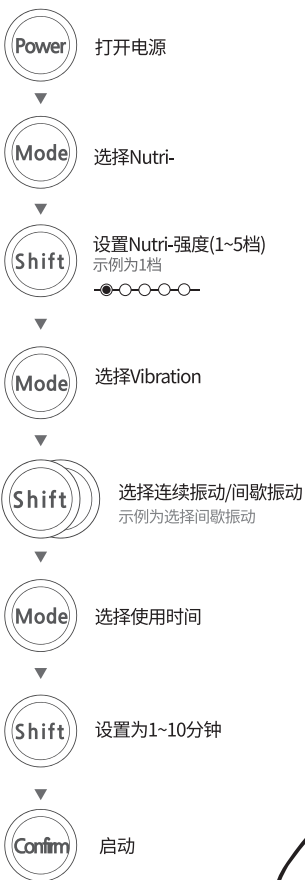

报修前的检查事项

症状	措施
产品无法正常运行。	<ul style="list-style-type: none">• 请确认是否正确按下了电源键。• 请按照使用说明书给本设备充电。
不通电。	<ul style="list-style-type: none">• 电池放电, 请给电池充电。• 将充电线连在供电装置上。• 请确认充电器是否运行。

产品规格

重量:180g

尺寸:50(L) x 50(W) x 185(H)mm

聚合物锂电池:1300mAh

适当使用温度:5~40°C

充电时间:3~4小时

充电电压:DC 5.0V 1.0A

产品保证书

产品保证书			
产品名称	超声波LED按摩仪	型名	Ture Solution超声波LED按摩仪
购买日期		联系方式	
客户姓名			
客户住址			

A/S指南

免费A/S

1. 初次使用时, 产品本身存在异常
2. 缺陷引发故障时
3. 免费A/S: 购买产品后1年

有偿A/S

1. 超过保修期时
2. 客户处理不慎(运输、过度操作、浸水)引发故障时
3. 在指定A/S中心以外的场所擅自拆卸、改造时
4. 规定项目的填写不充分或保证书丢失时

客服中心 032-579-3833

网 站 <http://sf.skinable.net>

Skinable

5合1充电式超声波TRUE SOLUTION

the
Han

产品名称	超声波LED按摩仪
型名	Style Follow Skinable 5合1充电式超声波TRUE SOLUTION
制造商	TheHan Co., Ltd.
地址	韩国仁川市西区Geobuk路17 Na栋413~415号 (石南洞, 仁川Techpia)
制造国家	韩国
网站	http://sf.skinable.net
客服中心	032-579-3833
产品规格	50 x 50 x 185mm / 180g
材质	ABS等
电磁波合格注册	R-R-T6H-VibrationLED

